

Måleskema til Hand Aid

Str/vare	100	200	300	400	500
nr. XXS	22 cm	24 cm			70 cm
XS	24 cm	25 cm			80 cm
S	29 cm	28 cm	41 cm	53 cm	98 cm
M	33 cm	30 cm			115 cm
L	42 cm	36 cm	47 cm	65 cm	125 cm

Billede anvendes til modellerne 100, 200 og 300.



Start her rundt om tomlen

Slut her

Jo mere støtte du behøver jo længere skal bandagen være ud over det "stramme" mål



Bestilling hos:

Kirsten C. Pedersen
www.kcpedersen.dk
+45 46 56 29 68

Billedet anvendes til modellerne 500



Start her rundt om tomlen

Slut her, ovenfor albueleddet


Jo mere støtte du behøver jo længere skal bandagen være ud over det "stramme" mål, og kan evt snos flere gange omkring armen, inden du når over albuen.


HAND aid



til dig som arbejder med hænder




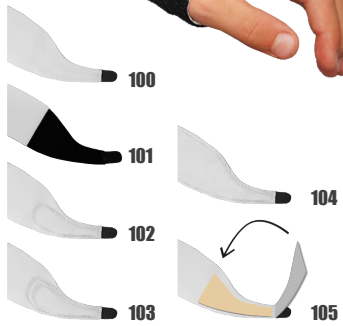

100-105 tommelbandage

En lav model som giver støtte til tomlens første led og til håndleddet. De mindste størrelser passer små børnehænder. Størrelse vælges dels efter hånden størrelse og dels ud fra hvor meget støtte der ønskes, større størrelser giver mere støtte til håndleddet.

Tommelstøtte 100 fås desuden med foret tommelgreb (nr. 101), forstærket tommelgreb (nr. 102) og trippelforstærket tommelgreb (103). Model 104 er en dobbeltlaget bandage som giver mere støtte og har bedre holdbarhed. Model 105 har en forstærkning af plast som formes omkring tommel efter opvarmning i mikroovn.

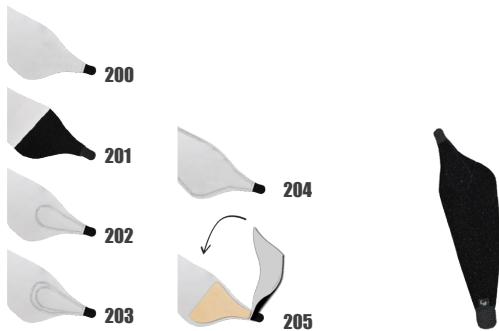

200-205 tommelbandage

Høj model som giver støtte til tomlens første og andet led som til håndleddet. De mindste størrelser passer små børnehænder. Størrelse vælges dels efter hånden størrelse og dels ud fra hvor meget støtte der ønskes, større størrelser giver mere støtte til håndleddet.

Tommelstøtte 200 fås desuden med foret tommelgreb (nr. 201), forstærket tommelgreb (nr. 202) og trippelforstærket tommelgreb (nr. 203). Model 204 er en dobbeltlaget bandage som giver mere støtte og har bedre holdbarhed. Model 205 har en forstærkning af plast som formes omkring tomlen efter opvarmning i mikroovn.



300,301 håndledsstøtte

Håndledsstøtte 300 giver en præcis støtte af håndleddet, forhindre belastning i yderstilling og modvirker overbelastning. Findes desuden uden hul til tomlen i version 301.

Anvendes efter frakturer og ligamentskader, som ledbeskyttelse ved artrose/artrit og som støtte til sportsaktiviteter m.m.



400 LE/ME bånd

En tennis- henholdsvis golfarm bandage som giver kompression på involveret muskulatur og fungerer som en påmindelse når musklen arbejder monotomt.

Bandagen kan desuden anvendes som håndledsstøtte ved f.eks. ganglion og giver her kompression over gangliet.



500-503 supinationssslynge


Supinationssslynge 500 roterer underarmen i supineret retning. Hvis en venstrehånds supinationssslynge anvendes til højre hånd fungerer den som en pronationsslynge og vice versa.

Supinationssslyngen findes desuden i en foret model (nr. 501) og en forstærket model (nr. 502) og trippelforstærket model som giver en kraftig støtte.

HAND
aid

BESTILLING OG PRISER

Samtlige produkter er CE-mærket og kan bestilles på www.handaid.se

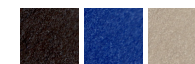

FABRIFOAM

Fabrifoams yderside består af en lycra/nylonblanding. Indersiden består af et skum med åbne celler. Skumsiden er latexfri og lader fugt passerer og er åndbar. Materialet er behageligt mod huden. Indersiden har høj friktionsfaktor, så bandagen ikke glider.

Fabrifoam fås i blå, sort og sandfarve.